

drive™

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

Rev1.05.08.14

stackable bath step

escalón apilable para baño

marchepied empilable pour  
la baignoire

item #RTL12068

drive™

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

The Drive Bath Step is designed to make getting in and out of the bath or tub easier. The Drive Bath Step features a large flat slip proof stepping surface with built-in non-slip pads. Two or more steps can be combined to raise the height of the steps by following the instructions below.


## instructions

To combine bath steps, follow the instructions below.

1. Place bath step on flat surface.
2. Using a coin, remove each of the 4 white circles located on the top of the bath step. Store these for future use.



3. Place second bath step on top of first, lining up prongs on underside of step with receptacle holes. Press down firmly to secure in place.

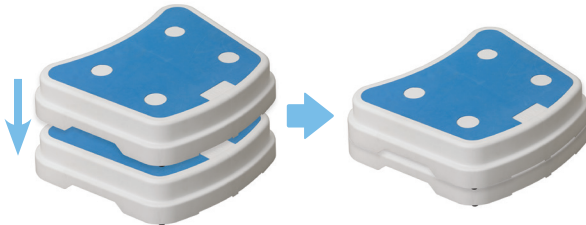

## 1-year limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year of the original date of purchase for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This 1 year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

The logo for Drive Medical, featuring the word "drive" in a bold, blue, lowercase sans-serif font. A small yellow square is positioned above the letter "i". A trademark symbol (TM) is located at the top right of the logo.

© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

El escalón de baño Drive está diseñado para entrar y salir de la bañera o tina con más facilidad. El escalón de baño Drive cuenta con una superficie para pisar grande y plana que cuenta con almohadillas antideslizantes integradas. Se pueden combinar dos o más escalones para elevar la altura de los escalones siguiendo las instrucciones de abajo.


## instrucciones

Para combinar los escalones de baño, siga las siguientes instrucciones.

1. Coloque el escalón sobre una superficie plana.
2. Con una moneda, quite cada uno de los cuatro círculos de color blanco situados en la parte superior del escalón. Guárdelos para usarlos en el futuro.



3. Coloque el segundo escalón sobre el primer escalón, alineando las puntas en la parte inferior del escalón con los agujeros del receptáculo. Presione con firmeza hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

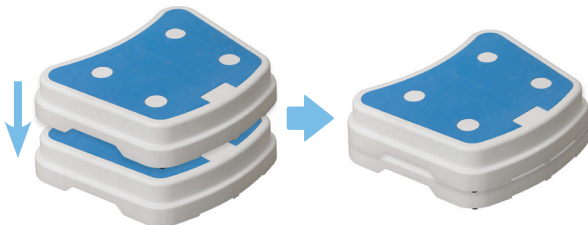

## garantía limitada por 1 año

Su producto marca Drive está garantizado de no tener defectos en los materiales y la fabricación por 1 año desde la compra por el consumidor original.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Estos 1 año de Garantía Limitada son una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario, o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

©2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

Le marchepied pour la baignoire Drive est conçu pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Le marchepied pour la baignoire Drive possède une grande surface plane antidérapante et des pieds intégrés tout aussi sécuritaires. Vous pouvez empiler deux marchepieds ou plus pour augmenter la hauteur totale, en suivant ces instructions.


## instructions

Suivez ces instructions pour empiler les marchepieds.

1. Placez le marchepied sur une surface plane.
2. À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez les quatre capuchons blancs situés sur le dessus du marchepied. Conservez-les pour un usage futur.



3. Placez un second marchepied sur le premier, en alignant les pattes sous le marchepied dans les trous. Appuyez fermement pour les joindre solidement.

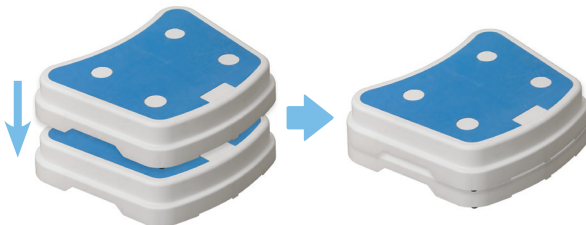

## garantie limitée de 1 an

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 1 an reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.

Le logo Drive est écrit en lettres bleues stylisées, avec un trait jaune au-dessus du 'i'. Une marque de commerce (TM) est visible à droite.

© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.  
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine